



15,6" TFT yüksek
hassasiyetli kapasitif
dokunmatik ekran



Çok açılı görünümü
destekler

Intelligence leads to easy.



HEYER markası her zaman yüksek teknoloji, değer odaklı ürün geliştirme ve inovasyona kendini adanmış, güvenlik ve kalite öncülüğünde olmuştur. Yeni yıldız VT8000, kritik bakım ihtiyaçları için tüm hasta gruplarını karşılamak üzere piyasaya sürüldü. Geliştirilmiş çok yönlü ventilatör, daha güçlü bir YBÜ oluşturulmasına yardımcı olur.



Kurumsal Merkez HEYER
Medical AG
Carl-Heier-Str. 1/3, 56130 Bad Ems, Almanya
Tel : +49 2603 791 0
Faks: +49 2603 791 200
info@heyemed.com
www.heyemedical.de




Teknoloji Yaşamı Güçlendirir

Yenilikçi UI arayüz tasarımı, mükemmel kullanıcı deneyimi sunar.



Kolaylaştırma

Gizli menüler yok, öğrenmesi kolay, kullanımı kolay.

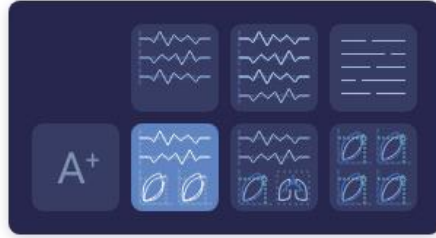


Özelleştirilmiş

Doktorun müdahalesine göre gerekli dalga formlarını ve parametreleri aynı ekranda görüntüleyin.

Görselleştirildi

Dinamik Akciğer, daha uygun tedavi seçenekleri için akciğer durumunu göstermek üzere grafikleri birleştirerek gerçek zamanlı direnci, kompliyansı, solunum durumunu ve ventilasyon durumunu sezgisel olarak yansıtabilir.

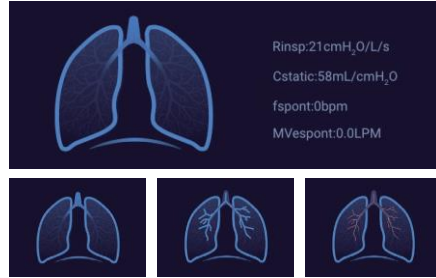

Akıllı YBÜ Ventilasyon İş İstasyonu

Güvenlik, güvenilirlik ve çok işlevlilik, ventilatördeki sağlık çalışanları için en temel gereksinimlerdir.



Yetişkin



Çocuk



Yenidoğan



VT8000, aşağıdakiler için solunum terapisi desteği sağlayan yeni bir hepsi bir arada YBÜ çözümüdür

-Yetişkin, çocuk ve yenidoğan

Yenidoğan Ventilasyonu Hakkında*

-Minimum tidal hacim 2 ml'dir
-Proksimal akış sensörünü benimseyin

Sadece geleneksel non-invaziv ve invaziv ventilasyon modlarını kapsamakla kalmaz, aynı zamanda CPRV modu, HFNC modunu da ekler.

CPRV Modu

CPR performansını daha profesyonel ve daha standart hale getirin.



HFNC Modu

Güvenli ve konforlu bir ortam sağlayın tedavisi, klinik olarak onaylanmış bir teknolojidir.




Kapsamlı Klinik Araçlar

VT8000 klinik ihtiyaçları önemser, entegre hizmetler sağlamak için klinik araçları ventilatöre entegre eder.


Geliştirilen Akciğer Koruyucu Ventilasyon Stratejileri (LPVS)

-Gelişmiş akciğer koruma kiti P/V Manevrası, Akciğer Alımı, C20/C, SI içerir.

-Alveollerin aşırı genişlemesini ve çökmesini önleyebilir ve ventilatör insidansını azaltabilir kaynaklı akciğer hasarı (VILI).

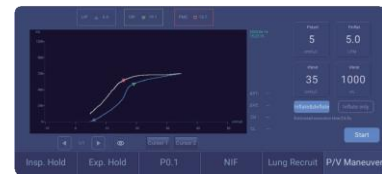

P/V Manevrası

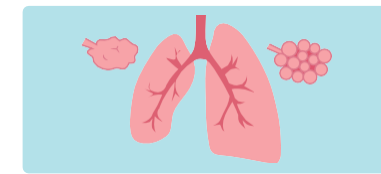

Akciğer İşe Alımı

Weaning Araçlarının Entegrasyonu

-Dahil et: SBT, NIF, P0.1, RSBI, WOB

-Ventilatörden ayırma olasılığını değerlendirmek için doktora yardımcı olur.

-Zamanında ayırma hastanın iyileşmesine yardımcı olur ve tedavi döngüsünü kısaltır.



SBT



NIF



P0.1



RSBI


Güvenli Yardımcı Basınç İzleme*

Ptp-Transpulmoner Basınç

-Özofagus basıncı ve hava yolu basıncı ölçülerek hesaplanabilir.

-Alveolar ventilasyonun durumunu izlemeye yardımcı olur.

-PEEP'in klinik düzenlemesine rehberlik edin.

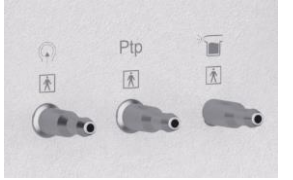


Yerleşik CUFF Yönetimi

-Endotrakeal entübasyondan sonra, yüksek Pcuff doku yaralanması açısından yüksek risk taşır, ancak çok düşük Pcuff yanlış pozisyona neden olabilir.

-Makine, manşet basıncını basınç göstergesi düzenlemesi olmadan otomatik olarak koruyabilir.


-Manşet basıncının iyi yönetilmesi, kan basıncını düşürmek için önemli bir araçtır. VAP oluşumu.

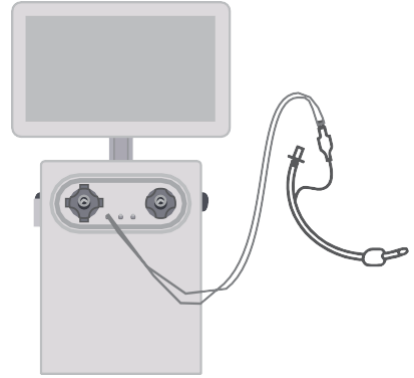

Çeşitli Uzatma Modülleri Esnek Konfigürasyonla Buluşuyor*



SpO2 Modülü

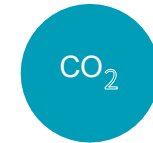

CO2 Modülü



Yenidoğan Modülü



NIBP Modülü



Elektronik Nebulizatör Modülü